

El InBody R20 te mostrará realmente de qué está hecho tu cuerpo.

InBody



Tecnología Avanzada de InBody:
 - DSM - BIA
 - Medidas Multi - Frecuencia
 - Electrodo de 8 Puntos Táctiles
 - Sin Usó de Estimaciones Empíricas

Composición Corporal

	Bajo	Normal	Alto	Valor Normal
Peso	55 70 85 100 115 130 145 160 175		85,0 kg	57,3 ~ 77,5
MME Masa Muscular Esquelética	70 80 90 100 110 120 130 140 150		38,7 kg	28,8 ~ 35,2
Masa Grasa Corporal	40 60 80 100 160 220 280 340 400		17,2 kg	8,1 ~ 16,1
ACT Agua Corporal Total	49,7 kg (37,9 ~ 46,3)		MLG Masa Libre de Grasa	67,8 kg (49,2 ~ 61,3)

Diagnóstico de Obesidad

	Valores	Valor Normal	IMC = $\frac{\text{Peso,kg}}{(\text{Estatura,m})^2}$
IMC Índice de Masa Corporal ¹⁾	27,8	18,5 ~ 23,0	
PGC Porcentaje de Grasa (%) Corporal	20,2	10,0 ~ 20,0	PGC = $\frac{\text{Grasa,kg}}{\text{Peso,kg}} \times 100$
RCC Relación Cintura-Cadera	0,88	0,80 ~ 0,90	RCC = $\frac{\text{Circunferencia de Cintura,cm}}{\text{Circunferencia de Cadera,cm}}$
MB Metabolismo Basal (kcal)	1835	1775 ~ 2087	


Control de Músculo y Grasa

Control de Músculo	0,0 kg	Control de Grasa	-5,2 kg
--------------------	--------	------------------	---------

Masa Magra Segmental



Grasa Segmental

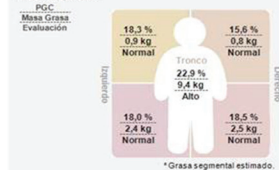

Impedancia

Z	BD	BI	TR	PD	PI (D)
20kHz	260,7	277,7	19,6	214,1	218,0
100kHz	228,0	245,7	17,1	185,6	189,1

* Utilice sus resultados como referencia cuando consulte a su médico o entrenador personal.

Lookin' Body Basic, es un software que se encarga de la organización de datos, proporcionando una explicación detallada y efectiva de los datos

- Agua Corporal Total
- Relación Cintura – Caderas
- Control de Grasa
- Grasa Corporal Segmentada
- Masa Grasa Corporal
- BMI (índice de masa corporal)
- Masa Magra
- Control Muscular
- Masa Magra Segmentada
- Peso
- Porcentaje de Grasa Corporal
- Masa Muscular Esquelética
- Tasa Metabólica Basal

Medición Segmentada Directa

La tecnología patentada de Biospace hace la medición absolutamente precisa, mediante la producción de impedancia para cada segmento diferente: las 4 extremidades y tronco.

Sistema de Electrodo Táctiles de 8 Puntos

La tecnología tetrapolar de electrodos táctiles de 8 puntos ha hecho posible perfeccionar la precisión y la reproducibilidad, mediante la fijación del punto exacto de medición de corriente y voltaje.

No Usa Estimaciones Empíricas

Gracias a la exclusiva tecnología de Biospace, no es necesario utilizar estimaciones empíricas. Los resultados no son afectados ni por el género ni por la edad.

Medición por Multi - Frecuencia

InBody usa multi - frecuencia (desde 1Khz a 1 Mhz) para medir el agua intracelular y extracelular por separado, y como consecuencia es útil para analizar casos de distribución de agua corporal no balanceada.



CDM Medical
 Mejorando la calidad de vida

Alonso de Córdova 5900 - Oficina 1103
 Las Condes – Santiago
 Teléfono : 2294949
 e- mail : ventas@cdmmedical.cl
 www.cdmmedical.cl



Siente el cambio en tu Cuerpo